

# LiNA SeaStar™ und LiNA Skin Hook™

Vollständiges Einwegsystem zur  
Retraktion von Weichgewebe rund  
um die Inzision




*Elastisches Retraktionssystem*



Innovation in der Gynäkologie

# LiNA SeaStar™ und LiNA Skin Hook™


LiNA SeaStar™ und LiNA Skin Hook™ bieten eine Einweglösung für die Retraktion von empfindlichem Weichgewebe. Dank der flexiblen Gestaltung des Systems ist eine Justierung und Verlagerung des LiNA SeaStar™ während chirurgischer Eingriffe möglich und der Zugang zur Operationsstelle gewährleistet.

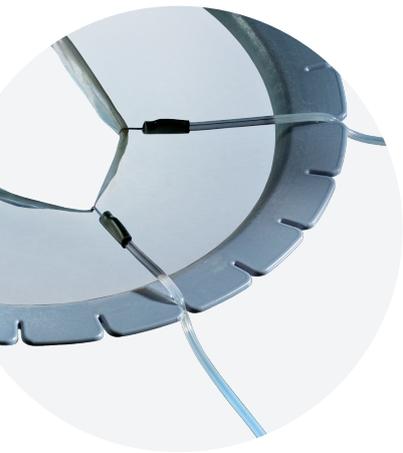

**Sichtbarkeit.** Selbsthaltend.

#### Freie Hände für den Chirurgen

LiNA SeaStar™ und LiNA Skin Hook™ bieten mehr Raum und bessere Sicht bei chirurgischen Eingriffen. Dadurch können Sie sich auf Eingriff, Lehre und Schulung konzentrieren, ohne sich mit der Retraktion befassen zu müssen.

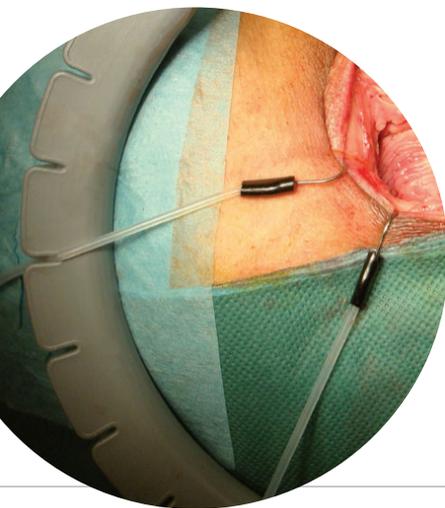

**Vielseitigkeit.** Eine große Auswahl an verfügbaren Optionen.


#### LiNA SeaStar™

LiNA SeaStar™ ist in einer großen Auswahl an Formen und Größen erhältlich. Die Rahmen können passend für verschiedene anatomische Bereiche eingestellt werden und erlauben so unterschiedliche chirurgische Anwendungen, so z. B. in der Vaginal- und Rektalchirurgie, aber auch bei anderen operativen Eingriffen.


#### LiNA Skin Hook™

Der LiNA Skin Hook™ ist mit vier verschiedenen Ausfertigungen des Edelstahlhäkchens erhältlich: klein und scharf; klein und stumpf; klein, gewinkelt und extrascharf; groß und stumpf. Die flexiblen elastischen Bänder können während des Eingriffs verstellt werden, um eine optimale Spannung zu erzeugen.


Die Eingriffsstelle auf die übliche Weise vorbereiten und abdecken. LiNA SeaStar™ gemäß den folgenden Schritten befestigen:

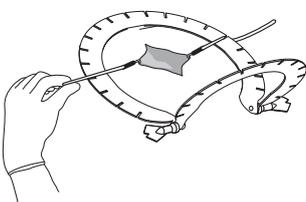

1. LiNA SeaStar™ rund um die erste Inzision platzieren und anschließend den LiNA Skin Hook™ mit gleicher Spannung in sich direkt gegenüberliegende Quadranten einsetzen.

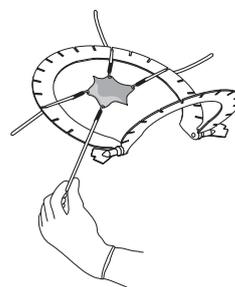

2. Den LiNA Skin Hook™ mit fortschreitender Präparation in die tieferen Schichten der Faszie einbringen. Anschließend können wie erforderlich weitere LiNA Skin Hooks hinzugefügt oder die bereits eingebrachten Häkchen umpositioniert werden, um eine ausgewogene Retraktion aus allen Winkeln zu erzielen.

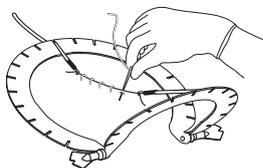


3. Um das Schließen zu vereinfachen, sollte eine gleichbleibende Spannung über direkt gegenüberliegende Quadranten aufrechterhalten werden.




# LiNA SeaStar™ und LiNA Skin Hook™

LiNA SeaStar™ und LiNA Skin Hook™ sind Einwegprodukte.


Abbildung der  
LiNA Skin Hooks  
in Originalgröße

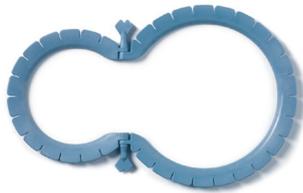

REF 4000-S-SL

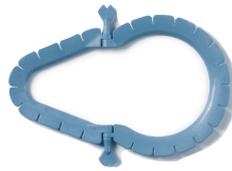


REF 4000-S-VS

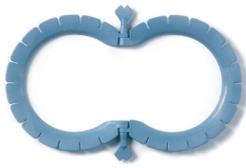


REF 4000-S-SS



REF 4000-S-VV

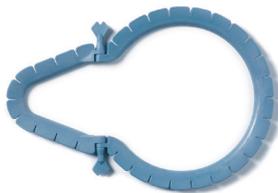

REF 4000-S-VL

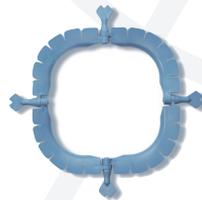

REF 4000-S-Q



REF SH-110  
Kleines scharfes Häkchen



REF SH-120  
Kleines stumpfes Häkchen



REF SH-130  
Kleines gewinkeltes extrascharfes  
Häkchen



REF SH-220  
Großes stumpfes Häkchen

## Bestellinformationen:

LiNA SeaStar™ und LiNA Skin Hook™ **CE 0459**

Produktcode	Beschreibung	UOM
4000-S-SL	LiNA SeaStar™ – klein/groß. Einwegprodukt.	5er-Packung, steril
4000-S-SS	LiNA SeaStar™ – klein/klein. Einwegprodukt.	5er-Packung, steril
4000-S-VL	LiNA SeaStar™ – V-Form/groß. Einwegprodukt.	5er-Packung, steril
4000-S-VS	LiNA SeaStar™ – V-Form/klein. Einwegprodukt.	5er-Packung, steril
4000-S-VV	LiNA SeaStar™ – V-Form/V-Form. Einwegprodukt.	5er-Packung, steril
4000-S-Q	LiNA SeaStar™ – quadratisch. Einwegprodukt.	5er-Packung, steril
SH-110	LiNA Skin Hook™ – kleines scharfes Häkchen. Einwegprodukt.	2 Stück in einem Beutel, Packung mit 5 Beuteln, steril
SH-120	LiNA Skin Hook™ – kleines stumpfes Häkchen. Einwegprodukt.	2 Stück in einem Beutel, Packung mit 5 Beuteln, steril
SH-130	LiNA Skin Hook™ – kleines gewinkeltes extrascharfes Häkchen. Einwegprodukt.	2 Stück in einem Beutel, Packung mit 5 Beuteln, steril
SH-220	LiNA Skin Hook™ – großes stumpfes Häkchen. Einwegprodukt.	2 Stück in einem Beutel, Packung mit 5 Beuteln, steril

## Vertriebspartner:

©2023 LiNA Medical ApS. Alle Rechte vorbehalten.

LiNA ist ein in der EU, den USA und China eingetragenes Warenzeichen von LiNA Medical.

LiNA Medical ApS

• Formervangen 5  
DK-2600 Glostrup  
Dänemark

• Tel.: +45 43 29 66 66  
Fax: +45 43 29 66 99  
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com  
CVR: 10054974

EN ISO 13485:2016  
Qualitätsmanagementsystem

