


CAREPAD[®]

DRIVING INNOVATION IN SURGERY

SORGFÄLTIGE LAGERUNG
DES PATIENTEN

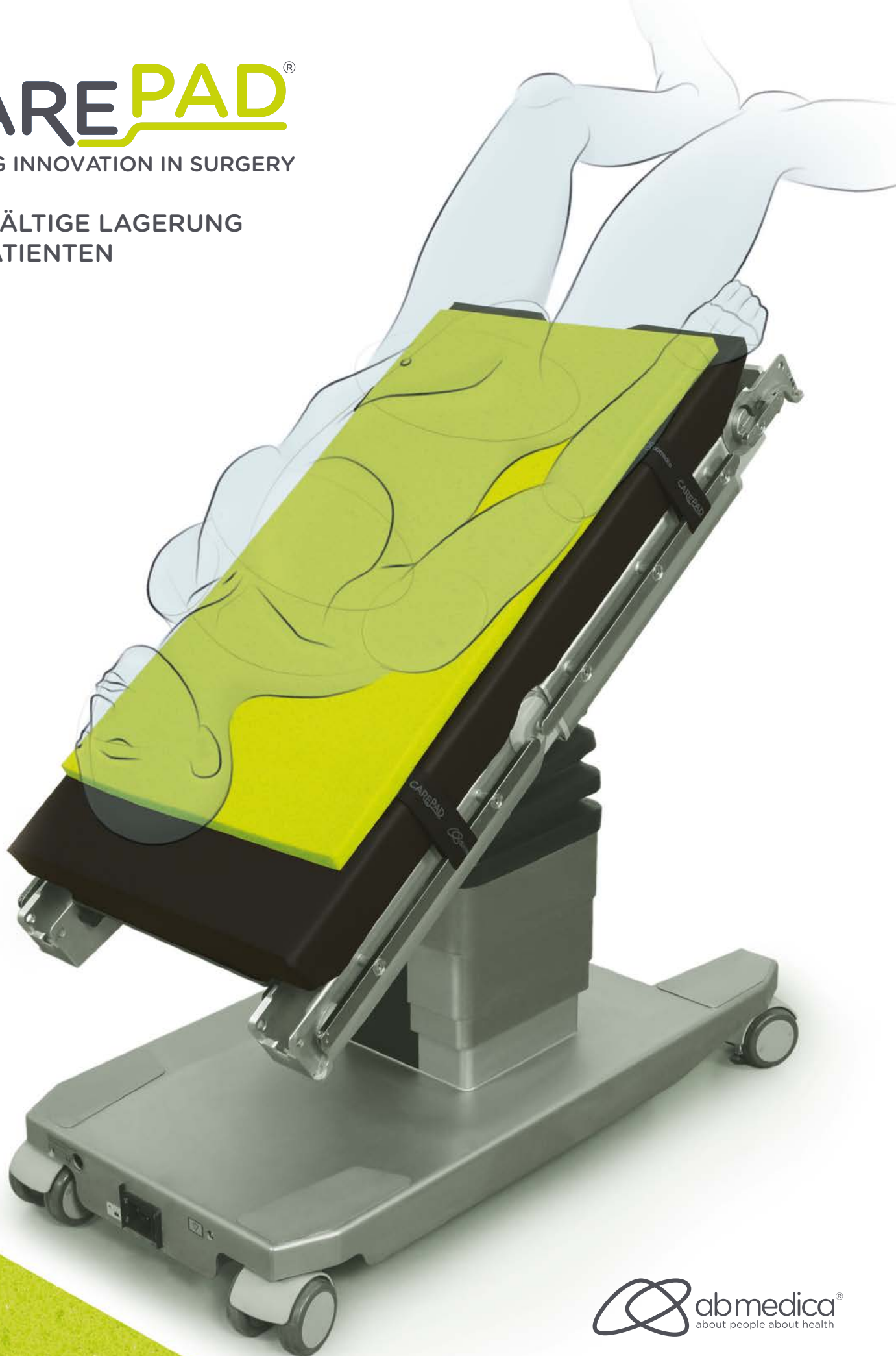

 abmedica[®]
about people about health

KEBOMED

CAREPAD[®]
DRIVING INNOVATION IN SURGERY

Ein System

INNOVATIV VOLLSTÄNDIG VIELSEITIG EINSETZBAR



Das System

CAREPAD[®]
DRIVING INNOVATION IN SURGERY

ist ein innovatives System zur Lagerung des Patienten bei chirurgischen Eingriffen, die mit traditionellen, robotergestützten oder laparoskopischen Techniken durchgeführt werden.

Es erlaubt eine **sichere, einfache und schnelle** Trendelenburg-Lagerung des Patienten auf dem Operationstisch.

Patientensicherheit

Das System hält den Patienten stabil in der gewünschten Position, indem es sich an die Form und das Gewicht des Patienten anpasst, das gleichmäßig auf die gesamte Fläche verteilt wird.

Effizient

Einfacher Aufbau dank einer patentierten, einfach reproduzierbaren und sicheren Lösung. Die optimale Gewichtsverteilung in den Druckzonen ist eine Garantie für eine hervorragende Funktionsweise, auch ohne den Einsatz von Schulterpolstern, Bändern oder Klebestreifen.

Schnell

Vormontiert, sekundenschnell positionierbar und stets einsatzbereit. Die patentierte Lösung erlaubt eine schnelle Neupositionierung.

Biokompatibel¹


Biokompatibel¹ und frei von Latex oder Phthalaten², aus viskoelastischem Memory-Material mit langsamem Rebound und hoher Dichte, d.h. mit Wärmeisolierung und Antidekubitus-Eigenschaften.

Trendelenburg-Lagerung

CarePad ist ideal für Patienten in Trendelenburg-Lagerung mit einer Neigung von bis zu 45 Grad.

Medizinprodukt

CarePad ist ein Medizinprodukt mit CE, Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2017/745

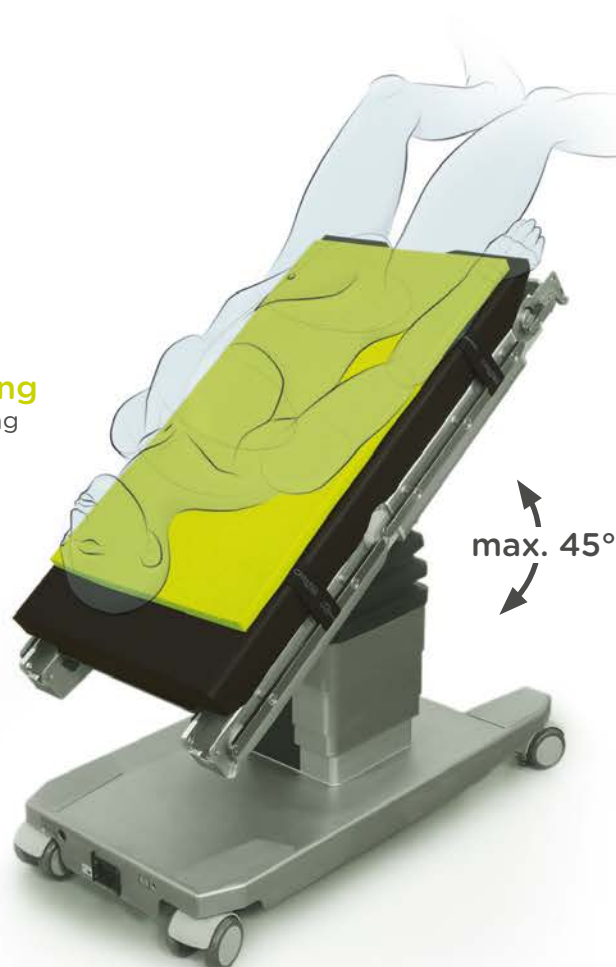

¹ Die Biokompatibilität des Geräts wurde gemäß ISO 10993-1:2018 nachgewiesen

² Bei der Herstellung wurde bewusst auf Stoffe verzichtet, die Latex und latexhaltige Stoffe oder Phthalate enthalten


Das Material

Die biokompatible¹, latex- und phthalatfreie CarePad-Matte² besteht aus einem viskoelastischen Memory-Material mit langsamem Rebound und hoher Dichte. Seine besondere Zusammensetzung mit offenen Zellen ist wärmeisolierend, wodurch die Körpertemperatur des Patienten konstant gehalten wird.

Die Anti-Dekubitus-Eigenschaften reduzieren das Risiko des Entstehens von postoperativen Rötungen und Reizungen sowie von Druckgeschwüren.

Viskoelastisches Material

das an die Form und das Gewicht des Patienten angepasst werden kann, um ein Verrutschen zu verhindern.

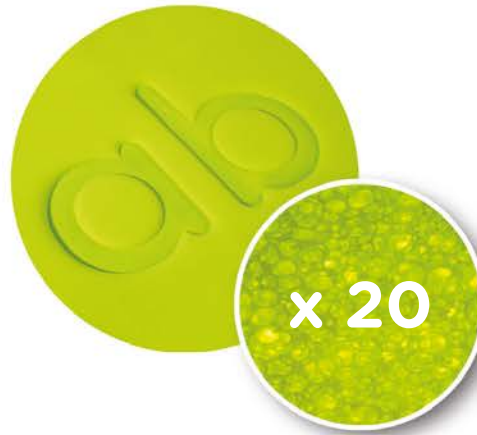

Patentierte Neupositionierung

Dank der patentierten Lösung ist eine einfache Neupositionierung der Klettverschlüsse über die gesamte Länge der Matratze möglich, um eine perfekte und maßgeschneiderte Fixierung auf den Stäben des Operationstisches zu ermöglichen.



Einheitsgröße

- Um die korrekte Lagerung von Patienten unabhängig von Größe und Gewicht (max. Gewicht 250 kg) zu ermöglichen.
- Um Bestellungen und die Lagerhaltung durch die Verwendung eines einzigen Codes einfacher zu machen.

Das Kit

Das Produkt wurde so vollständig und vielseitig wie möglich gestaltet und umfasst Folgendes:

- CAREPAD-Matte mit versetzbaren seitlichen Klettverschlussriemen
- 2 zusätzliche Klettverschlussriemen
- 1 Patiententuch
- 1 Brustgurt



Matte

Dank der Länge von 90 cm ermöglicht die Matte die korrekte Lagerung von Patienten unabhängig von ihrer Größe und ihrem Gewicht (max. Gewicht 250 kg).



Seitliche Riemen

Einfaches und vielseitiges Verankerungssystem für die Befestigung auf dem Operationstisch. Hochwertiger Klettverschluss, der auf der Matte vorpositioniert ist und dank der patentierten Lösung bei Bedarf vom Bediener neu eingestellt werden kann.



Zusätzliche Gurte

Zusätzliche längere Gurte, um die Matte ohne Seitenstangen, oder zur zusätzlichen Befestigung, leicht auf dem Operationstisch positionieren zu können.



Patiententuch

Tuch zur Fixation der Arme des Patienten sowie für die Umlagerung des Patienten auf der Matte.



Brustgurt

Sorgt für zusätzliche Patientensicherheit. Da es keine Knopflöcher gibt, ist das System extrem einfach und schnell zu installieren.





CAREPAD[®]

DRIVING INNOVATION IN SURGERY

PATENT Nr.

IT 102020000006058 / IT 102020000024568 / IT 202020000001249 / IT 202020000005827

Codes

Code	Beschreibung	Stück pro Packung
3/PAD90503	CAREPAD-Kit für die Trendelenburg-Lagerung	6
3/PAD102503	CAREPAD-XL-Kit für die Trendelenburg-Lagerung	3
3/PADARM50	CAREPAD ARMSHIELD Armschutz-System	6

Das Kit umfasst:

- 1 **CAREPAD**-Matte mit versetzbaren seitlichen Klettverschlussriemen
Abmessungen: 90x50x2,5 cm
- 2 zusätzliche Klettverschlussriemen
- 1 Patiententuch
- 1 Brustgurt



ab medica s.p.a.

Via J.F. Kennedy 10/12 - Cerro Maggiore (MI) - Italien
Tel. +39 02933051 - Fax +39 0293305400
www.abmedica.it

KEBOMED

KEBOMED GAS AG | Platz 3 | 6039 Root D4 | Schweiz

Telephone: + 41 41 450 34 10

info@kebomed.ch

www.kebomed.ch